


## **P**ulver - Probenaufnahme für Dilatometer

---

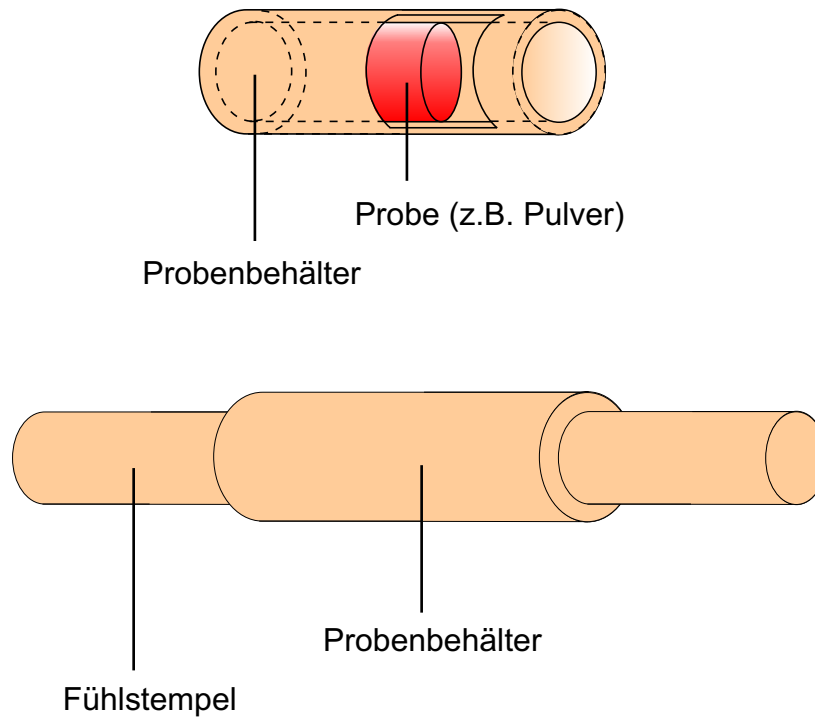

Die Firma Linseis bietet ab sofort für die Produktgruppe Dilatometer einen neuen Probenaufnehmer. Dieser ist geeignet zum Messen von Pulvern, Pasten oder bestimmten Flüssigkeiten. Diese Aufnehmer sind erhältlich aus  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , Quarzglas oder Graphit.

Durch präzise Fertigung der einzelnen Teile wird der Spalt zwischen dem Probenrohr und den massiven Stempeln sehr klein gehalten. Es steht auch eine Version mit einem festen Ende auf einer Seite zu Verfügung.

Dieser Probenaufnehmer kann sowohl im horizontalen, wie im vertikalen Dilatometer der Linseis Serie eingesetzt werden.